


explorē 12

Manuale Utente

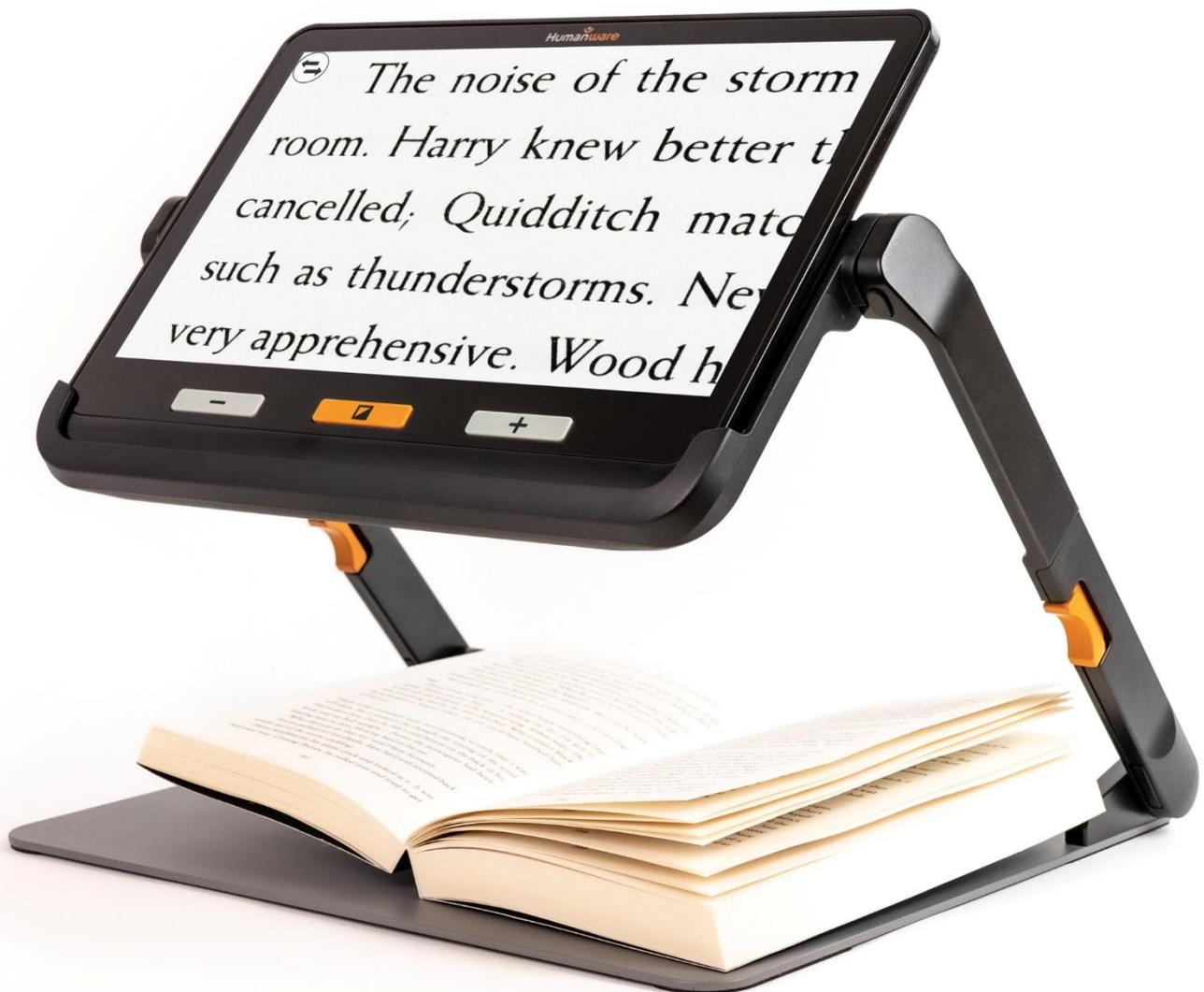

SOMMARIO

SOMMARIO	3
CAPITOLO 1 – Panoramica del prodotto	5
Introduzione	5
Contenuto della confezione	5
Descrizione del dispositivo	6
Prima di iniziare ad utilizzare explorē 12	8
CAPITOLO 2 – Uso dell'apparecchio	10
Accensione	10
Spegnimento.....	10
Modalità Ingrandimento	10
Aumentare e diminuire l'ingrandimento	11
Panoramica orizzontale di un'immagine reale	11
Attivare le telecamere	12
Modificare il contrasto	12
Accendere e spegnere le luci	13
Linea e Bande.....	13
Autofocus	13
Catturare un'immagine	14
Ingrandire e diminuire le immagini acquisite.....	14
Modalità Galleria.....	15
Visualizzare le immagini nella Galleria	15
Cancellare le immagini dalla Galleria	16
Usare uno schermo esterno	16
CAPITOLO 3 – Esportare le immagini su computer	17
CAPITOLO 4 – Menu	18
Accedere al Menu e modificare le impostazioni	18
CAPITOLO 5 – Aggiornare explorē 12.....	21
CAPITOLO 6 – Ricaricare explorē 12	22
CAPITOLO 7 – Risoluzione dei problemi	24
APPENDICE A – Sicurezza e Manutenzione.....	26
APPENDICE B – Caratteristiche Tecniche	28
APPENDICE C – Normative FCC	29
APPENDICE D – Garanzia	30

CAPITOLO 1 – PANORAMICA DEL PRODOTTO

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato HumanWare explorē 12, un ingranditore elettronico portatile, leggero e facile da utilizzare, con un ampio schermo da 12 pollici per una lettura più rapida e confortevole. Con il vostro explorē 12 potrete leggere in pochi secondi ogni documento stampato.

Essendo anche noi in HumanWare degli utilizzatori di ingranditori, sappiamo bene che oltre ad una buona qualità dell'immagine, un buon ingranditore deve essere semplice, portatile e comodo da utilizzare. Inoltre deve anche essere pronto da utilizzare dove e quando serve. Il vostro explorē 12 è stato progettato sulla base di queste caratteristiche e per questo siamo orgogliosi di offrirvi un prodotto di qualità che risponda ai vostri desideri e alle vostre esigenze.


Leggete attentamente le istruzioni per l'utilizzo e sulla sicurezza che trovate in questo Manuale Utente prima di usare il dispositivo. Se avete delle domande, contattate l'Assistenza Clienti di HumanWare. I riferimenti per l'Assistenza si trovano sul retro di questo Manuale. Copyright 2021 di Technologies HumanWare Inc., tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o distribuita in nessuna forma, o memorizzata su database o sistemi di recupero, senza autorizzazione scritta da parte di Technologies HumanWare Inc.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Videoingranditore explorē12
- Alimentatore e cavo USB
- Stand lettura per explorē 12 (se acquistato)
- Cavo video
- Custodia protettiva
- Panno in microfibra
- Pellicola di protezione schermo
- Manuale Utente

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Parte Frontale

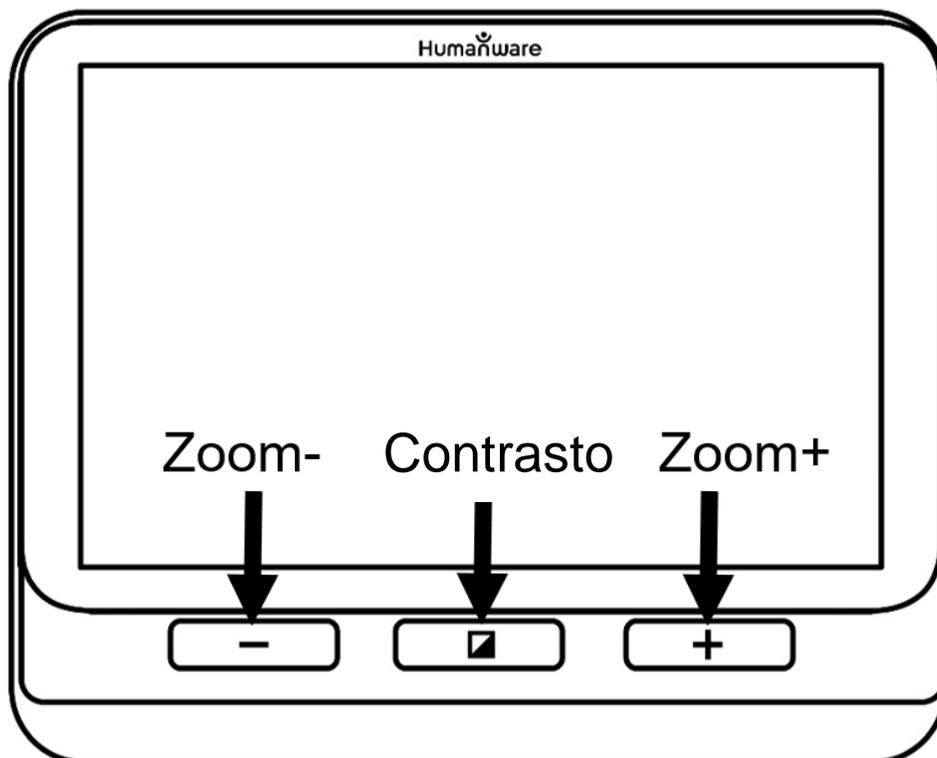


Lato sinistro

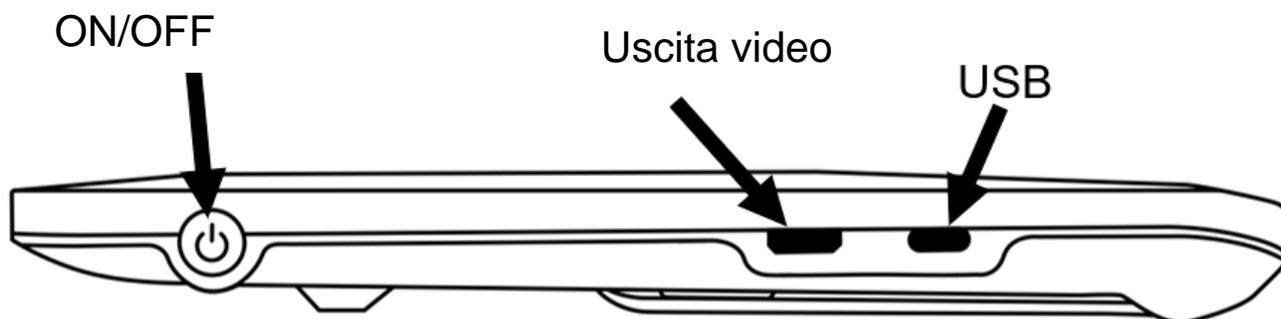

Parte superiore



Parte posteriore

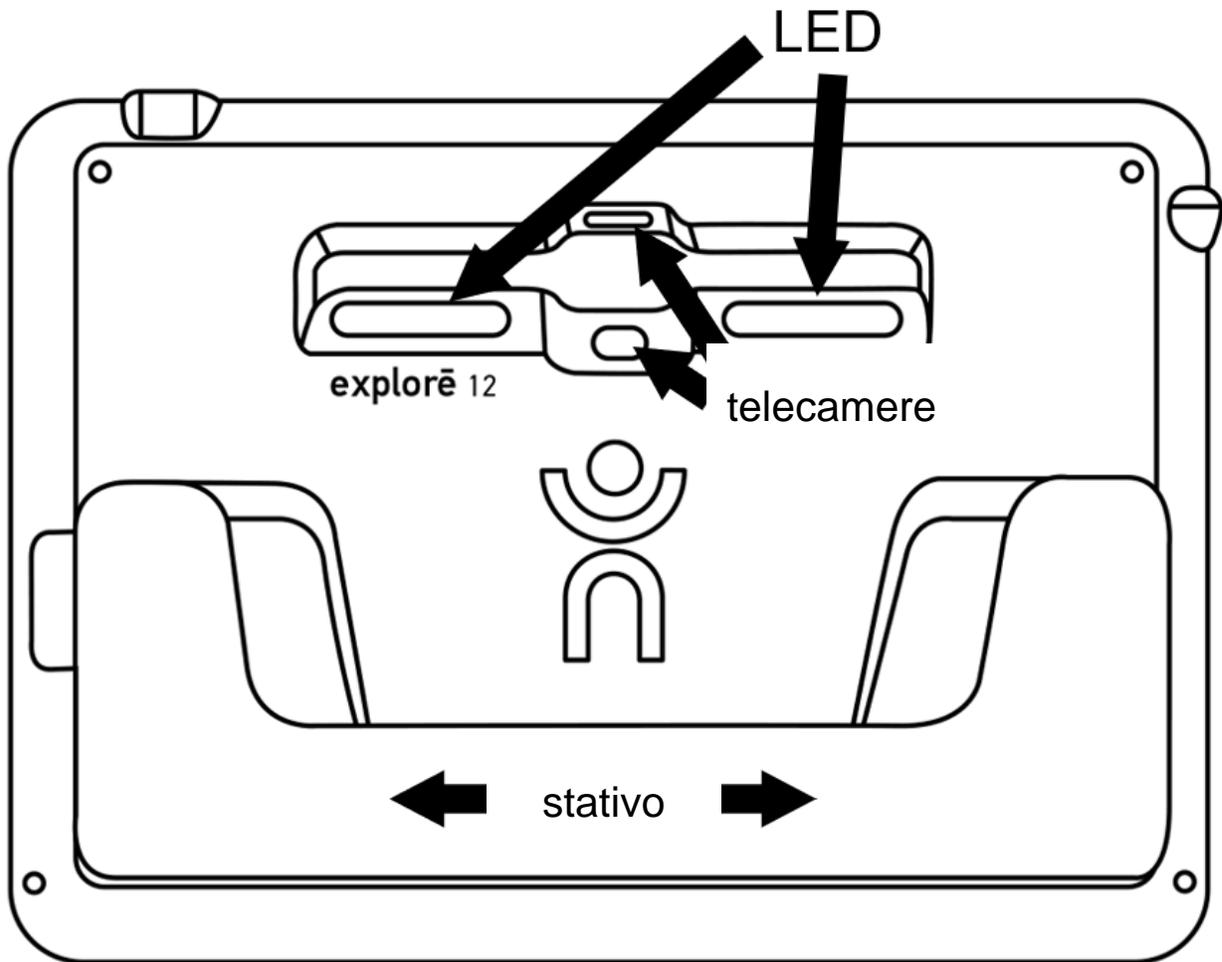


PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE EXPLORÈ 12





1. Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.
2. Tenete explorè 12 in modo che lo schermo sia rivolto verso di voi. Quindi, facendo attenzione, collegate il cavo alla porta USB sul lato sinistro del dispositivo e collegate l'alimentatore ad una presa di corrente.

IMPORTANTE: fate attenzione quando inserite il cavo nella porta USB.



3. Lasciate il dispositivo collegato fino a che la batteria sia completamente carica. Durante la ricarica, il dispositivo si scalda, ma è normale.
4. Quando il dispositivo è completamente carico, scollegate delicatamente il cavo di alimentazione.
5. Premete il **pulsante di Accensione** o aprite lo stativo per iniziare ad usare il dispositivo.

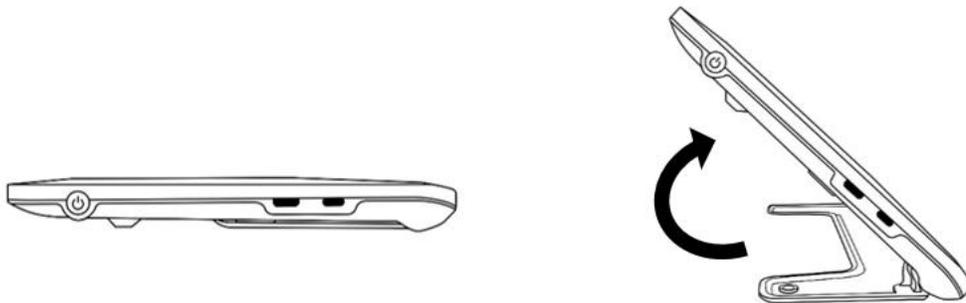

6. In alternativa, potete aprire lo stand per la lettura (se acquistato) e inserire il dispositivo nell'apposito supporto, per utilizzarlo in "Modalità Stand" (vedi immagini).

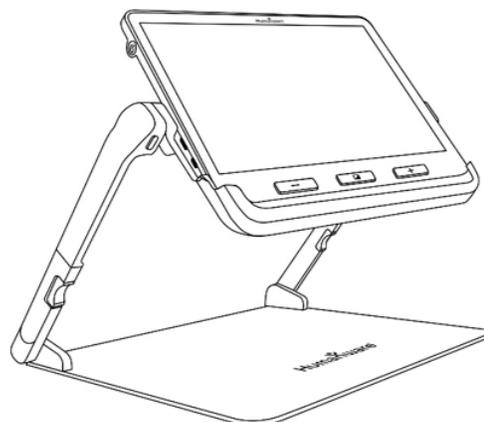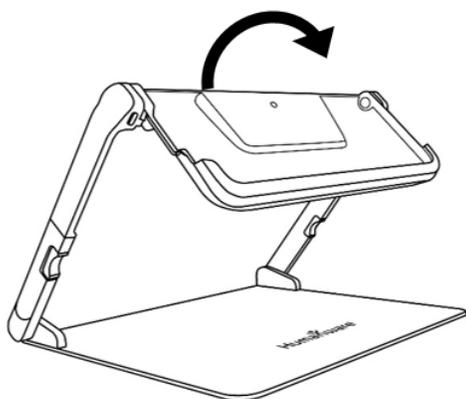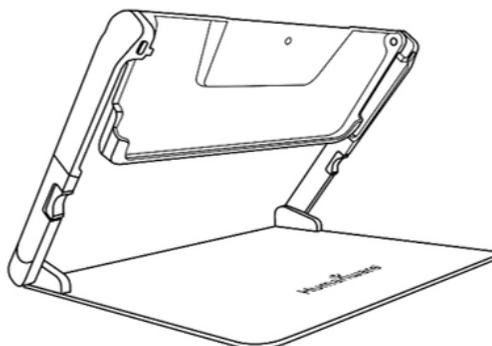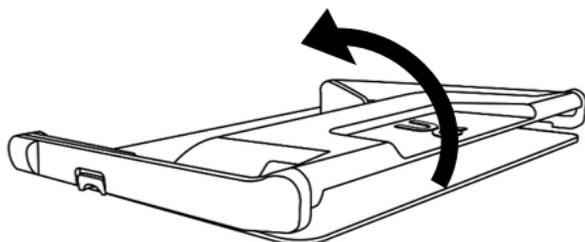


7. Quando avete terminato di utilizzare il dispositivo in "Modalità Stand", rimuoverlo dal supporto, quindi premete i due pulsanti arancioni sui lati dello stand per ripiegarlo.

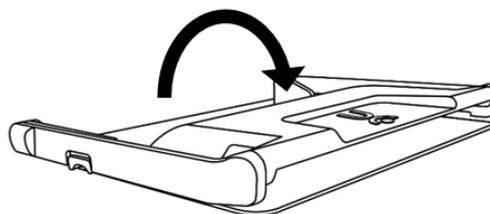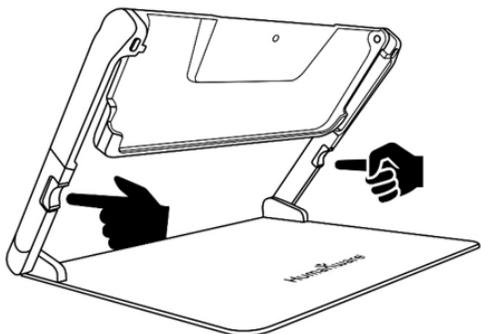

CAPITOLO 2 – USO DELL'APPARECCHIO

ACCENSIONE

Per accendere il videoingranditore, premete il **pulsante di Accensione** sul lato sinistro del dispositivo. Potete tenerlo come se fosse un tablet. In alternativa, è possibile **a)** accenderlo, aprendo lo stativo, sul retro del dispositivo, oppure **b)** aprire lo stand per la lettura (opzionale) e inserire in esso il dispositivo, quindi potete iniziare ad usare il dispositivo.

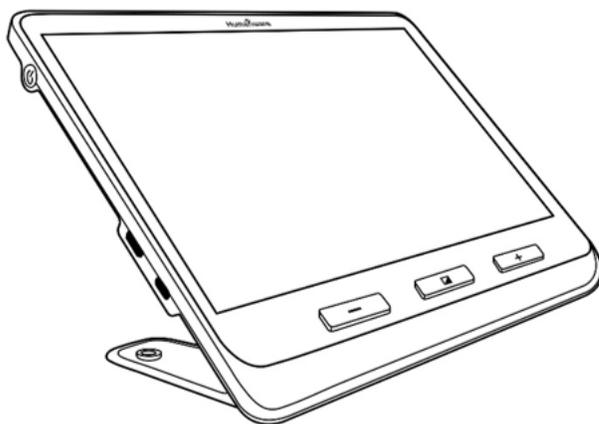

Dopo qualche secondo, si accenderà lo schermo di explorē 12, che mostrerà l'immagine della telecamera. Questa è la modalità Ingrandimento.

SPEGNIMENTO

Per spegnere il dispositivo, premete semplicemente il **pulsante di Accensione**.

MODALITÀ INGRANDIMENTO

La modalità Ingrandimento è la modalità operativa principale di explorē 12. Con lo stativo chiuso, sarà possibile ingrandire gli oggetti ad una certa distanza. Con lo stativo aperto, potrete ingrandire gli oggetti o i documenti vicini, posti su un tavolo. Quando il dispositivo è posizionato sullo stand di

lettura (opzionale) potete ingrandire oggetti o documenti posizionati sotto il dispositivo.

AUMENTARE E DIMINUIRE L'INGRANDIMENTO

Per ingrandire, premete o tenete premuto il pulsante **Zoom+** fino ad arrivare alla dimensione desiderata. Allo stesso modo, è possibile diminuire l'ingrandimento premendo o tenendo premuto il pulsante **Zoom-** fino a raggiungere la dimensione desiderata. In alternativa, è possibile abilitare la funzione **pinch & zoom** dal Menu (diminuire e aumentare la distanza tra due dita) per aumentare e diminuire l'ingrandimento di un'immagine dal vivo (vedi Capitolo 4).

Potete far scorrere due dita dall'alto al basso passando dalla parte centrale dello schermo e l'immagine avrà la dimensione reale 1x, per permettervi di riposizionare il documento. L'immagine tornerà all'ingrandimento precedente appena rilascerete le dita dallo schermo.

PANORAMICA ORIZZONTALE DI UN'IMMAGINE REALE

Quando state visualizzando un documento o un oggetto in modalità Ingrandimento e con lo stand di lettura (opzionale), potete avere una panoramica verso destra o verso sinistra, facendo scorrere un dito sullo schermo nella direzione desiderata.

Per livelli di ingrandimento 4x o superiori, potete anche scegliere di visualizzare le icone di freccia destra e sinistra sulla parte inferiore dello schermo (vedi Capitolo 4), selezionando questa opzione nella voce del Menu "Touchscreen/Pulsanti Panoramica".



Toccando queste frecce, potrete visualizzare a destra o a sinistra dell'area visualizzabile dalla telecamera.

Notate che dovete scegliere l'opzione **Lettura** affinché la panoramica orizzontale possa funzionare.

ATTIVARE LE TELECAMERE

La modalità Ingrandimento è impostata in modo predefinito come **Lettura** (telecamera da vicino), quando la base o lo stand sono aperti e il dispositivo è in modalità Ingrandimento. Tuttavia è possibile attivare l'opzione **Distanza** (telecamera distanza) premendo il pulsante **Cambia Fotocamera** sullo schermo in alto a sinistra.

In alternativa, potete cambiare la telecamera selezionando **Cambia Fotocamera** nel Menu (vedi Capitolo 4).

MODIFICARE IL CONTRASTO

explorē 12 permette di personalizzare il contrasto, per meglio rispondere alle esigenze dell'utente. Premete semplicemente il pulsante **Contrasto** fino a quando trovate quello più adatto a voi.

Le modalità **Contrasto** disponibili sono le seguenti:

- Colore, Nero su Bianco, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero

Ci sono altre modalità **Contrasto** disponibili (vedi Capitolo 4):

- Nero su Arancione, Arancione su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su blu, Bianco su blu, Blu su Bianco.

ACCENDERE E SPEGNERE LE LUCI

Premete e tenete premuti Zoom+ e Zoom- simultaneamente per spegnere le luci e per riaccenderle quando necessario. Attenzione: la telecamera per la visione da vicino (**Lettura**) deve essere selezionata per accendere le luci.

LINEA E BANDE

Con explorē 12 è possibile aggiungere una riga orizzontale o nascondere parte dell'immagine per facilitare la lettura.

Per aggiungere o rimuovere una riga, premere e tenere premuti i pulsanti **Contrasto** e **Zoom+** simultaneamente.

Per aggiungere o rimuovere le finestre, premere e tenere premuti i pulsanti **Contrasto** e **Zoom-** simultaneamente.

AUTOFOCUS

explorē 12 è dotato di autofocus che può essere impostato dal Menu su **Bloccato**, **Sbloccato** o **Manuale** (vedi Capitolo 4).

Per bloccare l'autofocus temporaneamente, fate un doppio tocco sullo schermo mentre state ingrandendo un'immagine. L'immagine di un lucchetto apparirà sull'angolo in alto a destra dello schermo. Eseguite un doppio tocco per tornare all'autofocus.



Si osservi che anche modificando il livello di ingrandimento dell'immagine viene annullato il blocco temporaneo dell'autofocus.

Quando l'autofocus è impostato su **Sbloccato** (predefinito), explorē 12 regolerà dinamicamente la messa a fuoco in base all'oggetto visualizzato al

momento. La messa a fuoco può essere forzata toccando una parte qualunque dello schermo.

Quando l'autofocus è impostato su **Bloccato**, oppure se usate l'ingranditore su un tavolo, **explorē 12** manterrà la messa a fuoco indipendentemente da qualsiasi spostamento o modifica.

Quando l'autofocus è impostato su **Manuale**, è possibile toccare una parte qualsiasi dello schermo affinché **explorē 12** attivi il focus su quella posizione in particolare. Tenete presente che l'impostazione **Manuale** funziona solo in Modalità Distanza e in Modalità Stand. La Modalità **Lettura** continuerà ad essere bloccata quando è selezionata la modalità Manuale.

CATTURARE UN'IMMAGINE

explorē 12 consente di acquisire un'immagine in Modalità Ingrandimento per facilitare la lettura, una funzione particolarmente utile quando si devono leggere le etichette dei prodotti sugli scaffali dei negozi. Per catturare un'immagine, premete il pulsante **Foto**, indirizzando la telecamera verso il testo da leggere. L'immagine sarà visualizzata sullo schermo fino a quando deciderete di tornare alla Modalità Ingrandimento.

Per ritornare alla Modalità Ingrandimento, premere nuovamente il pulsante **Foto**.

INGRANDIRE E DIMINUIRE LE IMMAGINI ACQUISITE

Per ingrandire le immagini acquisite, premete o tenete premuto il pulsante **Zoom+** fino a raggiungere la dimensione desiderata. Allo stesso modo, è possibile diminuire l'ingrandimento delle immagini acquisite premendo e tenendo premuto il pulsante **Zoom-** fino ad ottenere la dimensione dell'immagine desiderata.

In alternativa, potete abilitare la funzione da Menu **pinch & zoom** (aumentare e diminuire la distanza tra due dita) per aumentare o diminuire l'ingrandimento (vedi Capitolo 4). Tenete il dito sullo schermo e spostatelo per vedere le altre parti dell'immagine acquisita.

Come per l'immagine dal vivo, premete **Contrasto** per modificarlo fino a trovare quello desiderato.

MODALITÀ GALLERIA

Per salvare un'immagine in Galleria, dal vivo o acquisita, premere e tenere premuto il tasto **Foto** per mezzo secondo mentre siete in modalità Ingrandimento. Vedrete sullo schermo la scritta "Salvataggio" per indicare che l'immagine è stata salvata nella vostra Galleria.

In alternativa, è possibile dal Menu abilitare la funzione **Tocco e Pressione** (tenendo il dito sullo schermo) per salvare un'immagine in Galleria (vedi Capitolo 4).

VISUALIZZARE LE IMMAGINI NELLA GALLERIA

Per visualizzare le immagini nella Galleria, premere **Contrasto** e **Foto** simultaneamente. Quindi fate scorrere il dito verso sinistra o verso destra sullo schermo per selezionare un'immagine. Potete anche premere le frecce sullo schermo per selezionare un'immagine.

Potete aumentare o diminuire l'ingrandimento delle immagini salvate, premendo o tenendo premuto **Zoom+** e **Zoom-**. In alternativa, è possibile abilitare dal Menu la funzione **pinch & zoom** (diminuire e aumentare la distanza tra due dita) per aumentare o diminuire l'ingrandimento dell'immagine salvata (vedi Capitolo 4).

Per uscire dalla Galleria e tornare alla modalità Ingrandimento, premere il pulsante **Indietro** sullo schermo o premere e tenere premuto **Contrasto**.

CANCELLARE LE IMMAGINI DALLA GALLERIA

Per eliminare un'immagine dalla Galleria, entrate nella Galleria e spostatevi sull'immagine da eliminare (scorrendo il dito a sinistra o a destra sullo schermo o usando le frecce), quindi premete e tenete premuto **Foto**.

Oppure potete abilitare nel Menu la funzione **Tocco e pressione** per cancellare un'immagine (vedi Capitolo 4).

Le scelte sono **Eliminare** o **Annullare**. Premere Eliminare per confermare la cancellazione dell'immagine. Per annullare l'operazione, premere **Annullare** o **Contrasto**.

Potete cancellare tutte le immagini della Galleria con un solo comando, selezionando **Elimina Galleria** nel Menu.

USARE UNO SCHERMO ESTERNO

Per avere un'immagine più grande, è possibile visualizzare il contenuto di explorē 12 su uno schermo esterno (per esempio il monitor del televisore). Per farlo, collegate explorē 12 a uno schermo esterno tramite il cavo video in dotazione. Consultate l'Appendice B per l'elenco dei formati video supportati.

CAPITOLO 3 – ESPORTARE LE IMMAGINI SU COMPUTER

Per esportare le immagini salvate nella Galleria di explorē 12 sul vostro computer, collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione. Dovrebbe apparire la scritta "**PC collegato**". Ora è possibile copiare e incollare le immagini della Galleria nel computer usando Esplora File sul computer.

Quando collegato ad un personal computer, il dispositivo si comporta esattamente come una chiavetta USB o un drive esterno. Le immagini della Galleria si trovano nella cartella *Images* del vostro explorē 12.

Quando state copiando o cancellando immagini dal dispositivo, non scollegate mai il cavo USB, perchè alcune immagini potrebbero essere perse.

CAPITOLO 4 – MENU

ACCEDERE AL MENU E MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI

Premere e tenere premuto il pulsante **Contrasto** per entrare nel Menu. Potete spostarvi nel Menu facendo scorrere il dito su e giù sullo schermo, oppure premendo le frecce su/giù, oppure premendo **Zoom+** per scorrere verso l'alto e **Zoom-** per scorrere verso il basso.

Per selezionare un elemento, toccatelo. Per tornare al menu precedente, premere **Contrasto** o **Indietro**. Premere ancora **Contrasto** per tornare alla modalità Ingrandimento. Per uscire dal Menu, premere e tenere premuto **Contrasto** o **Indietro**.

Il Menu contiene le seguenti voci:

- **Galleria** (per accedere alle immagini in Galleria)
- **Cambia Fotocamera:** Distanza*, Lettura (Telecamera per Lettura* in modalità Stativo o in modalità Stand)
- **Autofocus:** Sbloccato*, Bloccato (Bloccato* in modalità Stativo), Manuale (Bloccato in modalità Stativo)
- **Luminosità dello Schermo** (cambia il livello di luminosità dello schermo): da 1 a 9 (8*)
- **Touchscreen** (sottomenu, toccare per abilitare gesti e vibrazioni)
 - **Pinch & zoom** (diminuire/aumentare la distanza tra due dita per diminuire/aumentare l'ingrandimento)
 - **Vibrazione**
 - **Tocco & pressione** (tenere il dito premuto sullo schermo in modalità Ingrandimento per salvare un'immagine in Galleria)

- **Pulsanti Panoramica** (per ingrandimento 4x o superiore, solo quando su stand ripiegabile; visualizza frecce sinistra e destra sul bordo inferiore dello schermo, per andare all'estrema sinistra o destra dell'area visualizzabile dalla telecamera, mentre si ingrandisce un'immagine reale)
- **Auto-spegnimento** (imposta per quanto tempo il dispositivo resta acceso senza utilizzarlo): 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti*, 10 minuti, Mai
- **Zoom preferito** (modifica l'ingrandimento predefinito quando aprite il dispositivo): Precedente (fattore ingrandimento utilizzato quando avete chiuso il dispositivo), da 2x* a 30x; da 2x* a 15x (in modalità Stand con Telecamera Lettura)
- **Contrasto** (sottomenu)
 - **Contrasto Preferito** (seleziona il contrasto con il quale explorē 12 si avvia): Precedente* (ultimo contrasto utilizzato), Colore, Contrasti abilitati
 - **Menu** (modifica colori Menu): Nero su Bianco*, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero, Nero su Arancio, Arancio su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su Blu, Bianco su Blu, Blu su Bianco
 - **Contrasto Attivato** (seleziona le coppie di colori per la Modalità Ingrandimento): Nero su Bianco*, Bianco su Nero, Nero su Giallo, Giallo su Nero, Nero su Arancio, Arancio su Nero, Nero su Ciano, Ciano su Nero, Nero su Viola, Viola su Nero, Nero su Verde, Verde su Nero, Blu su Giallo, Giallo su blu, Bianco su Blu, Blu su Bianco
- **Linea e Bande:** Linea, Bande, Nessuna*

- **Luci:** Acceso*, Basso, Spento
- **Dimensione testo del Menu:** Piccolo, Medio*, Grande
- **Lingua:** Inglese US*, Inglese UK, Francese (CA), Francese (FR), Spagnolo (US), Spagnolo (ES), Tedesco, Olandese, Danese, Polacco, Portoghese (PT), Portoghese (BR), Norvegese, Italiano, Svedese, Finlandese, Russo, Ceco, Giapponese, Coreano, Islandese, Estone, Turco, Lituano, Ungherese, Lèttone, Arabo, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Ebraico, Georgiano, Persiano, Curdo
- **Schermo:** 50Hz, 60Hz*
- **Elimina Galleria:** Cancella tutte le immagini nella Galleria
- **Impostazioni predefinite:** Cancella tutte le impostazioni personali e reimposta le impostazioni di fabbrica predefinite
- **Informazioni su** (mostra informazioni che riguardano il vostro dispositivo): Data e ora, versione Software, Hardware, Numero di serie.

CAPITOLO 5 – AGGIORNARE EXPLORĒ 12

Collegatevi alla pagina:

<https://support.humanware.com/en-international/support/explore>

e scaricate l'ultima versione del software per explorē 12. Collegate il dispositivo al computer usando il cavo USB in dotazione. Tramite **Esplora file** sul computer, incollate il file scaricato direttamente nella cartella principale di explorē 12. Una volta completato il trasferimento, scollegate il cavo USB dal computer. Avviate explorē 12. Il dispositivo si dovrebbe aggiornare automaticamente.

CAPITOLO 6 – RICARICARE EXPLORĒ 12


IMPORTANTE: La batteria si scalda durante la ricarica, ma questo è normale. Non ricaricare la batteria vicino ad una fonte di calore.

Per ricaricare la batteria tramite una presa di corrente:

- Collegate il cavo di ricarica USB all'alimentatore di explorē 12. Quindi collegatelo all'ingranditore e l'alimentatore ad una presa di corrente.
- Lasciate il dispositivo collegato fino a quando la batteria sarà completamente carica. Un dispositivo completamente scarico dovrebbe impiegare circa 3,5 ore per ricaricarsi.

Durante la procedura di ricarica, apparirà per qualche istante l'immagine qui sotto, ma anche quando accendete il dispositivo.

Questa icona indica che il dispositivo è in carica. Il numero rappresenta la percentuale di ricarica.

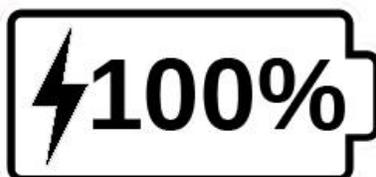

A causa del basso voltaggio, la ricarica dalla porta USB del PC potrebbe essere più lenta. In alcuni casi, il videoingranditore potrebbe non essere in grado di ricaricarsi in base alla quantità di energia fornita dal computer. Il modo più efficace per ricaricare il dispositivo consiste nell'usare il cavo USB in dotazione, collegato all'alimentatore.

Anche se potrebbe allungare i tempi di ricarica, il dispositivo può essere usato anche quando è collegato alla corrente.

Tenete presente che, se la batteria è completamente scarica o se il dispositivo non viene usato da molto tempo, potrebbe esserci un ritardo di qualche minuto prima che il dispositivo mostri una qualsiasi attività.

Come tutti i dispositivi elettronici, explorē 12 si scalderà durante l'uso o quando è in carica.

Precauzioni di sicurezza per la batteria:

- Non disassemblate o modificate la batteria.
- Usate solo l'alimentatore fornito da HumanWare.

Potrebbe verificarsi un rischio di surriscaldamento, incendio o esplosione se la batteria venisse a contatto con il fuoco, se fosse riscaldata, se fosse soggetta a urti, messa a contatto con l'acqua, o se i suoi terminali andassero in corto circuito.

CAPITOLO 7 – RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

explorē 12 non si accende:

Premete e tenete premuto il **pulsante di Accensione**. Se il dispositivo non si accende ancora, potrebbe essere necessario ricaricare la batteria.

Collegate il cavo USB in dotazione con l'alimentatore ad una presa di corrente o il solo cavo USB alla porta USB di un computer acceso. Se la batteria fosse completamente scarica, potrebbe essere necessario qualche minuto, prima che il dispositivo mostri segni di attività (vedi Capitolo 6).

Lo schermo è nero:

Se l'unità si trova su un tavolo o su qualsiasi superficie piana, l'immagine potrebbe non essere visibile. Sollevate l'ingranditore per vedere se questo è il motivo per cui lo schermo è nero. Se questo non risolvesse il problema, provate a riavviare il dispositivo.

L'immagine è sfocata in modalità Ingrandimento:

Assicuratevi che l'autofocus sia impostato su **Sbloccato** nel Menu. Spostate il dispositivo sul documento che state visualizzando avanti e indietro. Questa operazione farà sì che explorē 12 rimetta a fuoco il documento.

explorē 12 si spegne dopo un periodo di inattività:

Questo è il comportamento normale per preservare la batteria. Di default, explorē 12 si spegnerà dopo 5 minuti di inattività. È possibile tuttavia configurare il tempo di spegnimento automatico predefinito tra 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti oppure Mai.

I colori sono difficili da individuare:

Come prima cosa assicuratevi che ci sia luce a sufficienza intorno a voi. Scegliete una diversa combinazione di colori premendo il pulsante **Contrasto** mentre siete in Modalità Ingrandimento.

Ci sono molti riflessi:

Spostate l'oggetto che state osservando per ridurre il riflesso. Potete spegnere le luci premendo e tenendo premuti **Zoom+** e **Zoom-** simultaneamente.

explorē 12 non risponde:

Accertatevi che explorē 12 non sia collegato all'alimentazione attraverso il cavo USB; se lo fosse, scollegatelo. Premete il **pulsante di Accensione** per 10 secondi. Il sistema si spegnerà. Quindi, premete il **pulsante di Accensione** per un secondo per riaccendere explorē 12.

Altri problemi:

Ripristinare le **Impostazioni predefinite** nel Menu.

Premete e tenete premuto il pulsante **Contrasto**. Scorrete verso il basso fino a raggiungere **Impostazioni predefinite** e selezionate Sì.

APPENDICE A – SICUREZZA E MANUTENZIONE

Non guardate direttamente le luci a LED sul lato posteriore dell'ingranditore.

Restate lontani da acqua o fonti di umidità.

Non immergete l'apparecchio nell'acqua.

Spegnete sempre explorē 12 prima di pulirlo.

Usate solo i cavi in dotazione con explorē 12.

Batteria:

explorē 12 ha una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio. La batteria deve essere sostituita da un tecnico autorizzato da HumanWare.

- Non usate/lasciate l'unità vicino a fonti di calore. Non lasciatela esposta ad alte temperature.
- Usate solo alimentatori USB compatibili per caricare la batteria.
- Non disassemblate o modificate l'unità.
- Non immergete l'unità in acqua, evitate che si bagni.
- Evitate che l'unità subisca urti.
- Non usate oggetti appuntiti o oggetti che possano danneggiare l'unità.
- Se la batteria perde del liquido e quest'ultimo viene a contatto con gli occhi, non sfregateli. Piuttosto, bagnateli con acqua corrente ed eventualmente consultate un medico per prevenire ulteriori problemi.
- Se la batteria perde del liquido e quest'ultimo viene a contatto con la pelle, bagnate immediatamente con acqua corrente la parte del corpo che è stata a contatto con il liquido per prevenire infortuni.

Pulire lo schermo LCD:

Assicuratevi che il dispositivo sia spento e scollegato dalla corrente.

Assicuratevi di usare solo panni in microfibra come quello in dotazione.

Passate delicatamente il panno sullo schermo LCD.

Se decidete di pulire lo schermo LCD con un detergente liquido, assicuratevi che il detergente sia adatto a pulire gli schermi LCD. L'acqua distillata, l'alcool isopropilico e soluzioni miste acqua-aceto (con non più del 10% di aceto) rientrano tra le soluzioni liquide utilizzabili per gli schermi LCD.

Usate solo una quantità minima di liquido per evitare infiltrazioni all'interno del dispositivo. Le infiltrazioni di liquidi infatti possono danneggiare il dispositivo. Assicuratevi che a schermo non rimangano tracce di liquidi. Ripetete i passaggi precedenti per le macchie più difficili da rimuovere.

- **Non usate MAI detersivi per la casa per pulire explorē 12.**
- **Non spruzzate MAI direttamente liquidi sullo schermo LCD.**
- **Non usate MAI prodotti per la pulizia che contengano alcool etilico, acido etilico, ammoniacale, acetone o cloruro di metile.**
- **Non usate MAI tovaglioli di carta per pulire lo schermo LCD.**

APPENDICE B – CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni dispositivo: 282,5 x 202 x 24 mm

Dimensione Stand: 345 x 270 x 35,5 mm

Schermo: LCD da 12" ISP

Peso: 1134 g

Peso con stand: 2268 g

Alimentazione in entrata: Connettore USB di tipo C. 5V@3A, 9V@2A o 12V@1.5A

Durata batteria: 3,5 ore in modalità Lettura o Distanza;
2 ore in modalità Stand con LED accesi

Tempo di ricarica: 4 ore (con dispositivo spento)

Risoluzione formati video supportati:

1080p 60Hz, 1080p 50Hz, 720p 60Hz, 720p 50Hz

Nessun supporto in emulazione in DVI

Condizioni di utilizzo:

Temperatura: da 10°C a 40°C

Umidità: da 20% a 80%

Condizioni per trasporto e stoccaggio:

Temperatura: da -20°C a +60°C

Umidità: da 10% a 95%

APPENDICE C – NORMATIVE FCC

Dichiarazione FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'uso è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare delle operazioni indesiderate.

Avviso FCC:

Modifiche non autorizzate al sistema possono invalidare la capacità di usare questo dispositivo da parte dell'utente.

Nota:

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato soddisfare le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, che seguono la Parte 15 delle normative FCC. Queste limitazioni sono state pensate per dare una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato come da istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in un'installazione in particolare. Se il prodotto provoca danni alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata dall'accensione o dallo spegnimento del dispositivo, l'utente può provare a risolvere l'interferenza seguendo una di queste indicazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per avere aiuto.

Nota: questa unità è stata testata con cavi schermati. Per assicurare piena compatibilità, con questo dispositivo dovranno essere usati cavi schermati.

APPENDICE D – GARANZIA

HumanWare garantisce che explorē 12, a partire dalla data di acquisto, è esente da qualsiasi difetto materiale e di manodopera per 2 anni, salvo indicazioni diverse previste dalle leggi in vigore nel paese in cui è stato acquistato.

Questa garanzia non è trasferibile e si applica a tutti i casi dove il danno non è causato da uso improprio, maltrattamento o negligenza. Per uso improprio si intende un uso del prodotto diverso da quello descritto in questo manuale. In nessun caso HumanWare o i suoi distributori saranno ritenuti responsabili per danni indiretti o conseguenti.

Non sarà effettuata nessuna riparazione o sostituzione in garanzia senza fornire una copia della ricevuta d'acquisto originale. Se il sistema deve essere rispedito, usate la confezione originale.

Customer support

For customer support, please contact the HumanWare office nearest you or view our Website at:
www.humanware.com

North America: 1 (800) 722-3393
support@humanware.com

Europe: (0044) 1933 415 800
eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com



Servizio clienti per l'Italia:

Subvision S.r.l.

tel. (+39) 02 799341

assistenza@subvisionmilano.com

ACCD-0271
REV 03